

RENPHO

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

AERIA ELEMENTARY THERMAL

Модел: RP-ALM071H



Масажор за стъпала и прасци с топлинна функция
Прочетете внимателно ръководството преди употреба
и го запазете за бъдеща справка.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност	01
Технически спецификации	02
Запознайте се с уреда	03
Преди употреба	03
Управление	04
Поддръжка	05
Отстраняване на проблеми	06
Обслужване на клиенти	07
Изхвърляне и съответствие	07

Благодарим ви, че избрахте масажора за крака с топлинна функция на RENPHO. Уредът е предназначен да масажира стъпалата и прасците и помага при мускулна болка и умора. За да осигурите безопасност и да избегнете материални щети, прочетете внимателно това ръководство и използвайте уреда според указанията. Неспазването им може да доведе до тежки наранявания или смърт и/или сериозни материални щети.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – за да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване, спазвайте указанията по-долу:

1. Ако попадате в някоя от следните групи, консултирайте се с лекар преди употреба:
 - бременни жени и жени в период непосредствено след раждане;
 - деца;
 - възрастни хора (над 65 години);
 - лица с кожни инфекции, чувствителна кожа, зачервявания, рани и/или изгаряния по кожата;
 - лица с пейсмейкър или друго имплантирано медицинско изделие;
 - лица със сърдечно заболяване, злокачествени образувания или други сериозни здравословни състояния;
 - лица, които са на медицинско лечение или изпитват дискомфорт по време на масаж;
 - лица с остеопороза, диабет или тромбоза;
 - лица с високо или необичайно кръвно налягане;
 - лица с нарушена сетивност, която намалява усещането за болка или топлина (например при метаболитно нарушение);
 - лица с температура над 38 °C.
2. Спрете употребата, ако след масажа се чувствате необичайно или неразположено, и се консултирайте с лекар.
3. НЕ използвайте резервни части, които не са одобрени от RENPHO.
4. Лица без професионална квалификация не бива да разглобяват или подменят части на уреда без разрешение от производителя.
5. НЕ използвайте уреда, ако повърхността на маншетите или захранващият кабел са повредени.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА. При работа с уреда винаги спазвайте основните предпазни мерки, включително следните:

1. Уредът е предназначен само за домашна употреба и не е предвиден за медицински цели. Не бива да се използва за лечение или облекчаване на заболяване или необичайно физическо състояние.
2. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
3. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.

ОПАСНОСТ – за да намалите риска от токов удар и пожар:

1. Никога не използвайте карфици или други метални закопчалки с този уред.
2. Уверете се, че напрежението и честотата на електрическата мрежа съответстват на посочените върху адаптера.
3. Не оставяйте уреда без надзор, докато работи.
4. Винаги изключвайте захранващия адаптер от контакта след всяка употреба.

5. Не включвайте и не изключвайте захранващия адаптер или въздушния маркуч с мокри ръце.
6. Дръжте кабела и уреда далеч от нагорещени повърхности.
7. Уредът има функция за загряване. Лица, които са нечувствителни или свръхчувствителни към топлина, трябва да изключат температурата по време на употреба.
8. НЕ използвайте и не съхранявайте уреда на влажни места, например в баня, нито на места с висока температура.
9. НЕ носете уреда за захранващия кабел или за ръчния контролер.
10. НЕ използвайте уреда по време на сън, при работа с машини или след употреба на алкохол.
11. НЕ стойте прави и не ходете, докато използвате уреда.
12. НЕ излагайте ръчния контролер, маншетите или захранващия адаптер на вода – това може да причини повреда или токов удар.
13. НЕ надрасквайте, не прегъвайте прекомерно, не дърпайте и не усуквайте кабела на захранващия адаптер.
14. НЕ поставяйте тежки предмети върху уреда и не пъхайте чужди тела в отворите (това може да причини пожар и токов удар).
15. НЕ използвайте остри предмети за надраскване или пробиване на маншетите – това може да доведе до изпускане на въздух.
16. НЕ поставяйте маншетите директно върху подути или възпалени участъци, чувствителна кожа или кожни обриви.
17. НЕ използвайте уреда повече от 20 минути наведнъж. Продължителната употреба може да доведе до прегряване и по-кратък живот на уреда.
18. НЕ използвайте уреда под одеяло или възглавница. Може да настъпи прегряване и да причини пожар, токов удар или нараняване.
19. НЕ използвайте уреда върху домашни любимци или животни.
20. Използвайте нагряващите се повърхности внимателно. Те могат да причинят сериозни изгаряния. Употребата на топлина без надзор от деца или лица с увреждания може да бъде опасна.
21. Температури, достатъчно високи, за да причинят изгаряне, могат да възникнат независимо от избраната настройка. Не използвайте уреда върху кърмаче, немощен човек, спящо лице или лице в безсъзнание. Не използвайте върху нечувствителна кожа или върху човек със слабо кръвообращение. Проверявайте често кожата, която е в контакт с нагрята част на уреда, за да намалите риска от образуване на мехури.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


Наименование	Масажор за крака с топлинна функция
Модел	RP-ALM071H
Вход на уреда	12 V, 2 A
Номинална мощност	24 W
Захранващ адаптер	Вход: 100–240 V AC, 50/60 Hz; Изход: 12 V, 2 A
Автоматично изключване	20 минути

Въздушна компресия	3 нива (L / M / H)
Топлинна функция	2 степени: около 43 °C (109 °F) и около 48 °C (118 °F)
Масажни режими	3 комбинирани и 2 самостоятелни

Какво има в кутията

- Чифт маншети за прасци и стъпала × 1
- Ръчен контролер × 1
- Захранващ адаптер × 1
- Ръководство за потребителя × 1
- Торбичка за съхранение × 1

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С УРЕДА

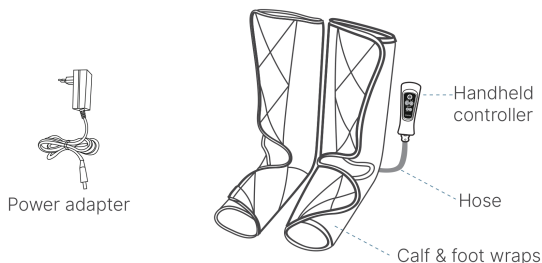


Надписите върху схемата означават: „Power adapter“ – захранващ адаптер; „Handheld controller“ – ръчен контролер; „Hose“ – въздушен маркуч; „Calf & foot wraps“ – маншети за прасците и стъпалата.


ПРЕДИ УПОТРЕБА

1.1 Поставете маншета на правилния крак

Когато обувате маншетите, се уверете, че поставяте съответния маншет на правилния крак: ляв и десен.

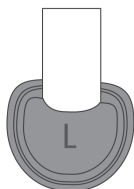

“L” for left leg

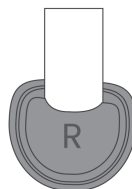

“R” for right leg

Надписите означават: „L“ for left leg – буквата „L“ е за левия крак; „R“ for right leg – буквата „R“ е за десния крак.


1.2 Свържете маркуча докрай

Уверете се, че маркучът е закрепен здраво, като насочите щракващата връзка към контролера, както е показано по-долу.


1.3 Ако масажът е твърде силен

Ако усещате масажа като твърде силен или предпочитате по-слаб натиск, следвайте тези препоръки:

- изберете най-ниското ниво на интензитет;
- разхлабете велкро лентата на съответната част;
- препоръчително е между масажора и прасеца да остане достатъчно място, в което да се поберат четири пръста.

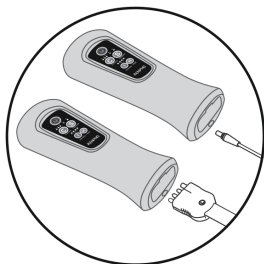


1.2

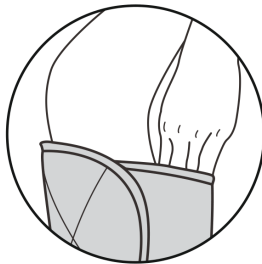

1.3

Ляво: 1.2 свързване на маркуча. Дясно: 1.3 луфт колкото четири пръста.

УПРАВЛЕНИЕ

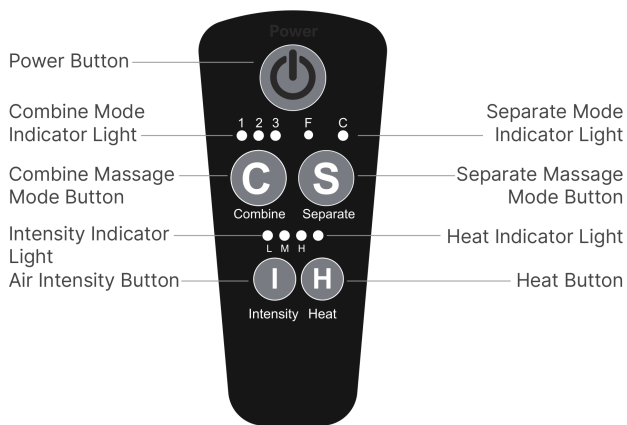

Надписите върху схемата означават: „Power Button“ – бутон за включване и изключване; „Combine Mode Indicator Light“ – индикатор за комбинирания режим; „Combine Massage Mode Button“ – бутон за комбинираните масажни режими; „Intensity Indicator Light“ – индикатор за интензитета; „Air Intensity Button“ – бутон за интензитета на въздушната компресия; „Separate Mode Indicator Light“ – индикатор за самостоятелния режим; „Separate Massage Mode Button“ – бутон за самостоятелните масажни режими; „Heat Indicator Light“ – индикатор за топлината; „Heat Button“ – бутон за топлината. Буквите L, M и H означават ниско, средно и високо ниво, а F и C – стъпала и прасци.

1. При успешно включване индикаторът за интензитета свети постоянно в червено.
2. Бутон за включване и изключване. Натиснете, за да включите или изключите масажора. Стандартната настройка е комбиниран режим 1 с интензитет на въздуха M и висока степен на топлина.
3. Бутон C – комбинирани масажни режими. Натиснете, за да изберете един от трите комбинирани режима или да ги изключите.
 - Комбиниран режим 1 (C1): масаж на стъпалата и прасците.
 - Комбиниран режим 2 (C2): масаж от прасците към стъпалата.
 - Комбиниран режим 3 (C3): масаж от стъпалата към прасците. Натиснете бутона отново, за да изключите комбинирания масаж.
4. Бутон S – самостоятелни масажни режими. Натиснете, за да изберете масаж поотделно на стъпалата или на прасците. F: масаж на стъпалата. C: масаж на прасците. Натиснете отново, за да изключите самостоятелния масаж.
5. Бутон H – топлина. Натиснете, за да смените степента на топлина (ниска и висока температура). Стандартната настройка е висока температура. Мигащ червен индикатор означава ниска температура (около 43 °C / 109 °F). Постоянно светещ червен индикатор означава висока температура (около 48 °C / 118 °F). С този бутон можете и да изключите топлината.
6. Бутон I – интензитет на въздуха. Натиснете, за да намалите или увеличите интензитета. Всеки режим има 3 нива на интензитет, а стандартното ниво е M. Препоръчително е да оставите луфт, в който да се поберат четири пръста, или да изберете по-ниско ниво, ако натискът ви се струва силен.

Забележка:

Масажорът се изключва автоматично на всеки 20 минути. Преди автоматичното изключване индикаторът на съответния режим мига в червено 10 пъти. Уредът има функция за запаметяване без прекъсване на захранването, затова при включване автоматично работи с последно използвания режим и интензитет. Ако сте изключили някоя от функциите – комбиниран режим, самостоятелен режим или топлина – с бутона C, при следващото включване функцията за памет не се прилага: уредът стартира със стандартната настройка C1, интензитет на въздуха M и висока степен на топлина (постоянно светещ червен индикатор).

ПОДДРЪЖКА

Почистване

Не перете в пералня. Не потапяйте уреда в течност за почистване. Не почиствайте с абразивни препарати, четки, бензин, керосин, препарат за стъкло или разреждител. Препоръчително е да избърсвате масажора с мека, леко навлажнена кърпа.

Прибиране

Не прегъвайте свързващия маркуч, когато прибирате уреда – това може да доведе до нарушено напompване.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Причина	Решение
Уредът не работи	Захранването не е включено или щепселът е разхлабен	Включете захранващия кабел правилно
Уредът не работи	Ключът за захранване не е включен или таймерът за автоматично изключване е спрял уреда	Включете захранването
Някоя част не се надува	Текущият масажен режим не включва масаж на тази част	Изберете съответния режим
Някоя част не се надува	Маркучът не е закрепен здраво и има изпускане на въздух	Проверете отново дали маркучът е свързан плътно с контролера – между накрайника на маркуча и контролера не трябва да има луфт
Някоя част не се надува	Маркучът е прегънат	Избягвайте прегъване на маркуча при прибиране. При нужда пишете на support-eu@renpho.com
Проблем	Причина	Решение
Натискът е силен или неприятен	Маншетът е пристегнат прекалено или е избран най-високият интензитет	Изберете по-ниско ниво; разхлабете велкрото на съответната част; натиснете бутона за захранване, за да изключите
Уредът спира внезапно	Защитата от прегряване изключва масажора автоматично, когато се нагрее прекалено	Изчакайте масажорът да изстине, преди да го включите отново
Уредът спира внезапно	20-минутният таймер е изключил уреда	Натиснете отново бутона за захранване
Ръчният контролер се загарява	Уредът е използван продължително (леко загаряване на контролера е нормално)	Препоръчва се употреба от 20 до 30 минути, за да се избегне претоварване. След изключване оставете масажора да изстине преди следваща употреба
Не се усеща топлина или топлината е слаба	Избрана е ниската температура или уредът работи само от 1-2 минути	Изберете високата температура и изчакайте 4-6 минути

Проблем	Причина	Решение
Разлика в интензитета между двата крака	Оставеният луфт при обуването на двата маншета е различен	Оставяйте еднакъв луфт и от двете страни

При други проблеми пишете на: support-eu@renpho.com

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Свържете се с нас при въпроси или затруднения. Екипът за обслужване на клиенти на RENPHO осигурява бърз отговор в рамките на работното време.

Имейл (ЕС и Обединено кралство)	support-eu@renpho.com
Телефон (Обединено кралство)	+44 (0)7434 666088, понеделник – петък, 9:00 – 17:00 (GMT)

При дефектни продукти или връщане на артикули се свържете с нас, като посочите номера на поръчката си. НЕ изхвърляйте части от продукта – те може да са необходими за проверка или ремонт.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ



Символ „зачеркнат контейнер“

Символът на зачеркнатия контейнер означава, че по закон сте задължени да изхвърляте тези уреди отделно от несортираните битови отпадъци, тоест старите уреди трябва да се изхвърлят отделно от битовия отпадък. Батерии и акумулатори, които не са трайно вградени, трябва да бъдат извадени предварително и изхвърлени отделно.

Връщане на стари уреди

Собствениците на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване могат да го предадат в предвидените от публичните органи по управление на отпадъците пунктове за връщане или събиране, за да се осигури правилното му третиране.



Декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. декларира, че това оборудване съответства на Директива 2014/30/ЕС, Директива 2014/35/ЕС, Директива 2011/65/ЕС и другите приложими разпоредби. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Производител: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd., No. 810-C063, 8th Floor, Xiangbin International Financial Centre, No.18, West Free Trade Street, Qianhai Bay, Shenzhen, Guangdong Province, 518000, Китай.