

RENPHO

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

AERIA ULTIMATE THERMAL 2

Модел: RP-ALM079H



Масажор за крака с топлина за бедра, прасци и стъпала
Прочетете внимателно ръководството преди употреба
и го запазете за бъдеща справка.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност	01
Технически спецификации	02
Запознайте се с уреда	03
Преди употреба	04
Управление	05
Безопасност и поддръжка	06
Отстраняване на проблеми	06
Обслужване на клиенти	07
Изхвърляне и съответствие	08

Благодарим ви, че избрахте масажора за крака с топлина на RENPHO. Уредът е предназначен да масажира целия крак – стъпалата, прасците и бедрата – и да отпуска мускулите. За да осигурите безопасност и да избегнете случайни повреди или наранявания, прочетете внимателно това ръководство и използвайте уреда само по указания начин. Неспазването на указанията може да доведе до тежки наранявания или смърт и/или сериозни материални щети.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – за да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване, спазвайте указанията по-долу:

1. Ако попадате в някоя от следните групи, консултирайте се с лекар преди употреба:
 - бременни жени и жени в период непосредствено след раждане;
 - деца;
 - възрастни хора (над 65 години);
 - лица с кожни инфекции, чувствителна кожа, зачервявания, рани и/или изгаряния по кожата;
 - лица с пейсмейкър или друго имплантирано медицинско изделие;
 - лица със сърдечно заболяване, злокачествени образувания или други сериозни здравословни състояния;
 - лица, които са на медицинско лечение или изпитват дискомфорт по време на масаж;
 - лица с остеопороза, диабет или тромбоза;
 - лица с високо или необичайно кръвно налягане;
 - лица с нарушена сетивност, която намалява усещането за болка или топлина (например при метаболитно нарушение);
 - лица с температура над 38 °C.
2. Спрете употребата, ако след масажа се чувствате необичайно или неразположено, и се консултирайте с лекар.
3. НЕ използвайте резервни части, които не са одобрени от RENPHO.
4. Лица без професионална квалификация не бива да разглобяват или подменят части на уреда без разрешение от производителя.
5. НЕ използвайте уреда, ако повърхността на маншоните или захранващият кабел са повредени.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА. При работа с уреда винаги спазвайте основните предпазни мерки, включително следните:

1. Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с нея опасности.
2. Децата не бива да си играят с уреда.
3. Почистването и поддръжката не бива да се извършват от деца.
4. Уредът не бива да се използва за медицински цели. Той е предназначен само за домашна употреба.

ОПАСНОСТ – за да намалите риска от токов удар и пожар:

1. Никога не използвайте карфици или други метални закопчалки с този уред.
2. Уверете се, че напрежението и честотата на електрическата мрежа съответстват на посочените върху адаптера.
3. Не оставяйте уреда без надзор, докато работи.
4. Винаги изключвайте захранващия адаптер от контакта след всяка употреба.

5. Не включвайте и не изключвайте захранващия адаптер или въздушния маркуч с мокри ръце.
6. Дръжте кабела и уреда далеч от нагорещени повърхности.
7. Уредът има функция за загряване. Лица, които са нечувствителни или свръхчувствителни към топлина, трябва да изключат температурата по време на употреба.
8. НЕ използвайте и не съхранявайте уреда на влажни места, например в баня, нито на места с висока температура.
9. НЕ носете уреда за захранващия кабел или за ръчния контролер.
10. НЕ използвайте уреда по време на сън, при работа с машини или след употреба на алкохол.
11. НЕ стойте прави и не ходете, докато използвате уреда.
12. НЕ излагайте ръчния контролер, маншоните или захранващия адаптер на вода – това може да причини повреда или токов удар.
13. НЕ надрасквайте, не прегъвайте прекомерно, не дърпайте и не усуквайте кабела на захранващия адаптер.
14. НЕ поставяйте тежки предмети върху уреда и не пъхайте чужди тела в отворите (това може да причини пожар и токов удар).
15. НЕ използвайте остри предмети за надраскване или пробиване на маншоните – това може да доведе до изпускане на въздух.
16. НЕ поставяйте маншоните директно върху подути или възпалени участъци, чувствителна кожа или кожни обриви.
17. НЕ използвайте уреда повече от 20 минути наведнъж. Продължителната употреба може да доведе до прегряване и по-кратък живот на уреда.
18. НЕ използвайте уреда под одеяло или възглавница. Може да настъпи прегряване и да причини пожар, токов удар или нараняване.
19. НЕ използвайте уреда върху домашни любимци или животни.
20. Използвайте нагряващите се повърхности внимателно. Те могат да причинят сериозни изгаряния. Употребата на топлина без надзор от деца или лица с увреждания може да бъде опасна.
21. Температури, достатъчно високи, за да причинят изгаряне, могат да възникнат независимо от избраната настройка. Не използвайте уреда върху кърмаче, немощен човек, спящо лице или лице в безсъзнание. Не използвайте върху нечувствителна кожа или върху човек със слабо кръвообращение. Проверявайте често кожата, която е в контакт с нагрята част на уреда, за да намалите риска от образуване на мехури.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


Наименование	Масажор за крака с топлина
Модел	RP-ALM079H
Вход на уреда	12 V, 2 A
Номинална мощност	24 W
Захранващ адаптер	Вход: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz; Изход: 12 V, 2 A
Автоматично изключване	20 минути

Зони на масаж	Бедра, прасци и стъпала
Масажни режими	6 (3 комбинирани и 3 самостоятелни)
Въздушна компресия	4 нива на интензитет
Топлинна функция	2 степени, 38 °C – 45 °C (100,4 °F – 113 °F)
Зона на загряване	Прасци и стъпала
Размери	470 × 170 × 220 мм
Тегло	2,24 кг

Какво има в кутията

- Маншон за бедро, ляв × 1
- Маншон за бедро, десен × 1
- Маншон за прасец и стъпало, ляв × 1
- Маншон за прасец и стъпало, десен × 1
- Ръчен контролер × 1
- Захранващ адаптер × 1
- Торбичка за съхранение × 1
- Ръководство за потребителя × 1

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С УРЕДА

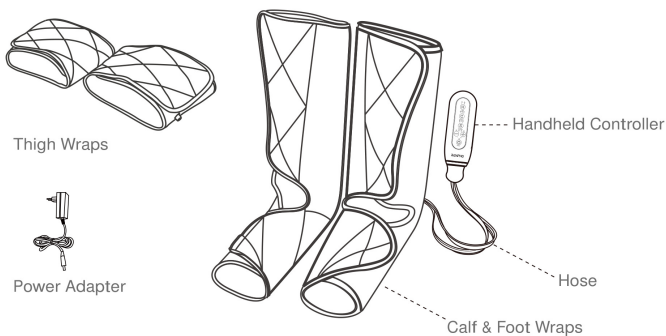

Надписите върху схемата означават: „Thigh Wraps“ – маншони за бедрата; „Power Adapter“ – захранващ адаптер; „Handheld Controller“ – ръчен контролер; „Hose“ – въздушен маркуч; „Calf & Foot Wraps“ – маншони за прасците и стъпалата.

ПРЕДИ УПОТРЕБА

1.1 Поставете маншона на правилния крак

Когато обувате маншоните, се уверете, че поставяте съответния маншон на правилния крак: ляв и десен.



"L" for left leg



"R" for right leg

Надписите означават: „L“ for left leg – буквата „L“ е за левия крак; „R“ for right leg – буквата „R“ е за десния крак.

1.2 Проверете маркировката върху маншоните за бедрата

Върху маншоните за бедрата има маркировка, която показва коя страна е нагоре.



Надписите означават: „Up“ – нагоре; „Down“ – надолу; „L“ – ляв крак; „R“ – десен крак.

1.3 Свържете маншона за бедрото с маншона за прасеца

Когато искате да използвате маншона за бедрото, се уверете, че маншоните за бедрото и за прасеца са свързани с въздушния маркуч и че маркучът е закрепен здраво.

1.4 Свържете маркуча към контролера

Уверете се, че маркучът е закрепен здраво, като насочите щракващата връзка към контролера, както е показано по-долу.

1.5 Ако масажът е твърде силен

Ако усещате масажа като твърде силен или предпочитате по-слаб натиск, следвайте тези препоръки:

- изберете най-ниското ниво на интензитет;

- разхлабете велкро лентата на съответната част;
- препоръчително е между масажора и прасеца да остане достатъчно място, в което да се побрат четири пръста.



1.3




1.4



1.5

1.3 свързване на маркуча, 1.4 щракване на маркуча в контролера, 1.5 луфт колкото четири пръста.

УПРАВЛЕНИЕ

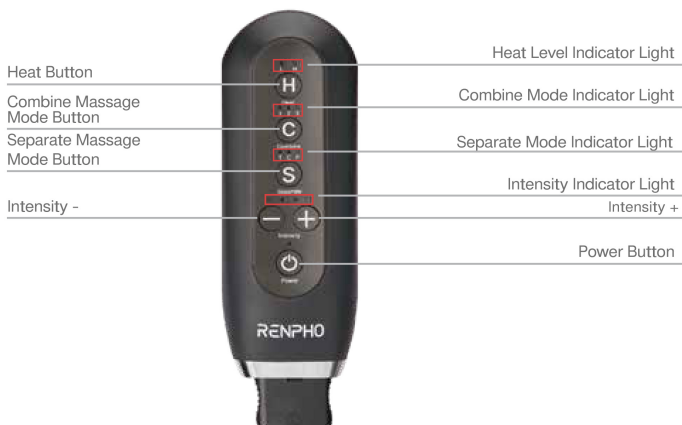

Надписите върху схемата означават: „Heat Button“ – бутон за топлината; „Combine Massage Mode Button“ – бутон за комбинираните масажни режими; „Separate Massage Mode Button“ – бутон за самостоятелните масажни режими; „Intensity -“ и „Intensity +“ – намаляване и увеличаване на интензитета; „Power Button“ – бутон за включване и изключване; „Heat Level Indicator Light“ – индикатор за степента на топлина; „Combine Mode Indicator Light“ – индикатор за комбинирания режим; „Separate Mode Indicator Light“ – индикатор за самостоятелния режим; „Intensity Indicator Light“ – индикатор за интензитета. Буквите върху контролера означават: L – ниска топлина, H – висока топлина, T – бедро, C – прасец, F – стъпало.

1. Бутон за включване и изключване. Натиснете, за да включите или изключите масажора. Стандартната настройка е комбиниран режим 1 с интензитет 2 и висока степен на топлина (индикаторът свети постоянно в зелено).
2. Бутон H – топлина. Натиснете, за да изберете ниска топлина (L), висока топлина (H) или изключена топлина. Зона на загряване: прасците и стъпалата.

3. Бутон С – комбинирани масажни режими. Натиснете, за да изберете един от следните режими:
 - С1: масаж на стъпалата, прасците и бедрата.
 - С2: масаж на стъпалата и прасците заедно. В този режим маркучът на маншоните за бедрата може да бъде разкачен.
 - С3: цикличен масаж на стъпалата, прасците и бедрата.
 - Натиснете бутона отново, за да изключите комбинирания масаж.
4. Бутон S – самостоятелни масажни режими. Натиснете, за да масажирате поотделно бедрата, прасците или стъпалата. Т: масаж само на бедрата. С: масаж само на прасците. F: масаж само на стъпалата. Натиснете бутона отново, за да изключите самостоятелния масаж.
5. Бутони + и – : интензитет на въздушната компресия. Натиснете +, за да увеличите, и –, за да намалите нивото. Има четири нива на интензитет. Бутоните за интензитет не действат, ако комбинираният и самостоятелният режим са изключени.

Забележка:

Масажортът се изключва автоматично на всеки 20 минути. Натиснете отново бутона за включване, за да продължите употребата.

Уредът има функция за запаметяване и при включване автоматично работи с последно използваните режим, топлина и интензитет. При смяна на режима степента на топлина и нивото на интензитет не се променят. Функцията за памет не работи, ако прекъснете захранването на уреда.

Маншоните за бедрата може да се разкачат. Когато са разкачени, не избирайте комбиниран режим С1 или С3, нито самостоятелния режим Т.

Ако изключите топлината и режима едновременно и не използвате контролера 10 секунди, уредът преминава в режим на готовност и зеленият индикатор на бутона за включване мига.

БЕЗОПАСНОСТ И ПОДДРЪЖКА

Почистване

Не перете в пералня. Не потапяйте уреда в течност за почистване. Не почиствайте с абразивни препарати, четки, бензин, керосин, препарат за стъкло или разреждател. Препоръчително е да избърсвате масажора с мека, леко навлажнена кърпа.

Прибиране

Не прегъвайте свързващия маркуч, когато прибирате уреда – това може да доведе до нарушено напompване.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Причина	Решение
Уредът не работи	Захранването не е включено или щепселът е разхлябен	Включете захранващия кабел правилно
Уредът не работи	Използван е адаптер с други параметри (индикаторът за захранване не свети)	Използвайте само адаптера от комплекта

Проблем	Причина	Решение
Уредът не работи	Ключът за захранване не е включен или таймерът за автоматично изключване е спрял уреда (индикаторът мига в зелено)	Включете захранването
Масажът е твърде силен, неприятен или стяга	Маншоните са пристегнати прекалено	Изберете най-ниския интензитет; разхлабете велкро лентите на съответната част; натиснете бутона за включване, за да изключите; разкачете маркуча от контролера, за да се изпразни бързо въздушната възглавница
Масажът е твърде силен, неприятен или стяга	Избран е твърде висок интензитет	Намалете нивото на интензитет с бутона –

Проблем	Причина	Решение
Топлината изчезва внезапно	Защита от прегряване след продължителна употреба	Включете масажора отново, след като изстине
Ръчният контролер се загрева	Уредът е използван продължително	Препоръчва се употреба от 20 до 30 минути на сесия, за да се избегне претоварване. След изключване оставете масажора да изстине преди следваща употреба
Интензитетът на двата крака се усеща различно	Оставеният луфт при затягането на велкро лентите е различен за двата крака	Оставяйте еднакъв луфт и от двете страни
Изпуска въздух	Въздушните маркучи не са поставени правилно	Поставете маркуча отново и се уверете, че е закрепен здраво

При други проблеми пишете на: support-eu@renpho.com

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Свържете се с нас при въпроси или затруднения. Екипът за обслужване на клиенти на RENPHO осигурява бърз отговор в рамките на работното време.

Имейл (ЕС и Обединено кралство)	support-eu@renpho.com
Телефон (Обединено кралство)	+44 (0)7434 666088, понеделник – петък, 9:00 – 17:00 (GMT)

При дефектни продукти или връщане на артикули се свържете с нас, като посочите номера на поръчката си. НЕ изхвърляйте части от продукта – те може да са необходими за проверка или ремонт.



Символ „зачеркнат контейнер“

Символът на зачеркнатия контейнер означава, че по закон сте задължени да изхвърляте тези уреди отделно от несортираните битови отпадъци, тоест старите уреди трябва да се изхвърлят отделно от битовия отпадък. Батерии и акумулатори, които не са трайно вградени, трябва да бъдат извадени предварително и изхвърлени отделно.

Връщане на стари уреди

Собствениците на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване могат да го предадат в предвидените от публичните органи по управление на отпадъците пунктове за връщане или събиране, за да се осигури правилното му третиране.



Декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. декларира, че това оборудване съответства на Директива 2014/30/ЕС, Директива 2014/35/ЕС, Директива 2011/65/ЕС и другите приложими разпоредби. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Производител: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd., No. 810-C063, 8th Floor, Xiangbin International Financial Centre, No.18, West Free Trade Street, Qianhai Bay, Shenzhen, Guangdong Province, 518000, Китай.