

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ELIS 1C

Модел: R-A033



Прочетете внимателно ръководството преди употреба
и го запазете за бъдеща справка.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност	01
За батериите	02
Технически спецификации	03
Запознайте се с Elis 1C	04
Преди първата употреба	06
Инсталиране на приложението и сдвояване	06
Калибриране на Elis 1C	08
Употреба на Elis 1C	09
Смяна на батериите	09
Отстраняване на проблеми	10
Обслужване на клиенти	10
Изхвърляне и съответствие	11

Благодарим ви, че избрахте RENPHO Elis 1C. Тази везна ви дава подробна информация за 13 показателя за здравето, които помагат за по-здравословен начин на живот. Пожелаваме ви приятно преживяване и успех по пътя към по-добра форма.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.

1. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
3. Везната е предназначена само за домашна употреба и не е предвидена за медицински или търговски цели. Тя не бива да се използва за диагностициране на заболяване, разстройство или необичайно физическо състояние.
4. Деца под 8 години, както и бременни жени, лица с остеопороза, пейсмейкър, изкуствени стави, преносим ЕКГ апарат или други метални импланти, трябва да използват везната само за измерване на тегло и задължително с обувки, за да се предотврати преминаването на електрически ток при стъпване.
5. Всички данни за телесния състав са само ориентировъчни и не заместват съвет от правоспособен медицински специалист.
6. НЕ претоварвайте везната. Максимална товароносимост: 200 кг (440 lb).
7. Преглеждайте везната за повреди преди всяка употреба. НЕ използвайте повредена везна, за да избегнете неточности или нараняване.
8. При неизправност първо проверете заряда на батериите. При необходимост ги сменете.

9. За точни резултати използвайте везната върху твърда, равна и суха повърхност.
10. За да избегнете смущения или опасност, не използвайте везната в близост до уреди със силни електромагнитни полета.
11. За да предотвратите нараняване, не стъпвайте върху ръбовете на везната, не скачайте и не тропайте върху нея.
12. Везната е деликатен и прецизен измервателен уред. Работете внимателно с нея, за да избегнете счупване.
13. Везната не е водоустойчива. Пазете я суха и никога не я потапяйте във вода. За почистване на повърхността използвайте влажна кърпа или препарат за стъкло. Не използвайте сапун или химически почистващи препарати.
14. Не излагайте везната на пряка слънчева светлина и не я използвайте при високи температури или много висока влажност. Съхранявайте я на хладно и сухо място.
15. Не се опитвайте да разглобявате везната по каквато и да е причина – това може да причини повреда.

ЗА БАТЕРИИТЕ

1. НЕ излагайте уреда или батериите на прекомерни температури.
2. Сменяйте всички батерии от комплекта едновременно.
3. Не смесвайте различни видове батерии, нито нови с употребявани.
4. Изтощените батерии трябва да се извадят от уреда и да се изхвърлят безопасно.
5. Ако уредът няма да се използва продължително време, извадете батериите.
6. НЕ използвайте модифицирани или повредени батерии.
7. Имайте предвид риска клемите на уреда или на батерията да бъдат дадени на късо от метални предмети.
8. Уредът съдържа непрезареждаеми батерии – тези батерии не трябва да се зареждат.
9. Винаги поставяйте батериите правилно според поляритета (+ и -), обозначен върху батерията и везната.

10. НЕ нагривайте, не свързвайте на късо, не разреждайте принудително, не капсуловайте и/или не модифицирайте батериите. НЕ деформирайте и не разглобявайте батериите.
11. Дръжте батериите далеч от деца.
12. НЕ зареждайте батериите.
13. НЕ заварявайте и не запоявайте директно към батериите.
14. НЕ изхвърляйте батериите в огън.
15. НЕ позволявайте на деца да сменят батериите без надзор от възрастен.
16. Съхранявайте неизползваните батерии в оригиналната им опаковка, далеч от метални предмети. Ако вече са разопаковани, не ги смесвайте.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Наименование	Везна за телесен състав
Модел	R-A033
Мерни единици	lb / kg / st
Обхват на измерване	0,2 – 200 кг (0,4 – 440 lb)
Стъпка на измерване	0,05 кг (0,2 lb)
Размери	280 × 280 × 25 мм
Батерии	3 × 1,5 V AAA (включени)

Какво има в кутията

- Везна Elis 1C × 1
- Батерии AAA × 3 (поставени предварително)

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ELIS 1C

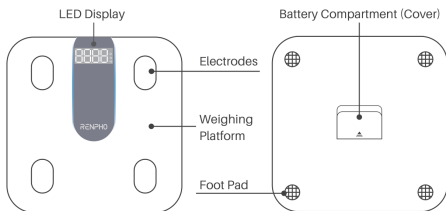

Надписите върху схемата означават: „LED Display“ – LED дисплей, „Electrodes“ – електроди, „Weighing Platform“ – платформа за измерване, „Foot Pad“ – крачета, „Battery Compartment (Cover)“ – капак на отделението за батерии.

За да пести енергия, взната се изключва автоматично след 10 секунди без движение.

Значение на иконите

ICONS

	Calibrating Calibrate the scale before each use.
	Overloaded Maximum capacity: 440lb / 200kg.
	Low Battery Replace the batteries.
	Measuring Body Fat
	Bluetooth Connectivity ⌋ Bluetooth is connecting. ⌋ Bluetooth is connected.
st lb kg	Units Switched via the app.

CAL

Калибриране. Калибрирайте везната преди всяка употреба.

Err

Претоварване. Максимална товароносимост 200 кг (440 lb).

Lo

Изтощена батерия. Сменете батериите.

0000

Измерване на телесни мазнини.

Bluetooth


Мигаща икона – връзката се установява. Постоянна икона – връзката е установена.

st lb kg

Мерни единици. Превключват се от приложението.

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

Извадете изолационната лента от отделението за батерии преди първото включване.

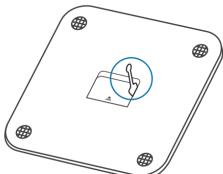

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО И СДВОЯВАНЕ

1. Изтеглете приложението RENPHO Health

Сканирайте QR кода или потърсете „RENPHO Health“ в App Store или Google Play.



Поради непрекъснатите обновявания и подобрения приложението „RENPHO Health“ може да изглежда малко по-различно.



2. Сдвоете везната по Bluetooth

Преди сдвояване включете Bluetooth на телефона си.

- Устройства с iOS (версия 12.0 или по-нова) изискват разрешение за Bluetooth.
- Устройства с Android (версия 7.0 или по-нова) изискват допълнително и разрешение за местоположение.


Метод 1

1. Отворете приложението RENPHO Health и стъпете върху електродите на везната с боси и сухи крака.
2. Докоснете „Connect“ (Свързване), когато в приложението се появи прозорец.

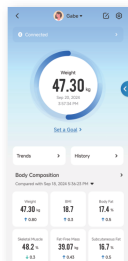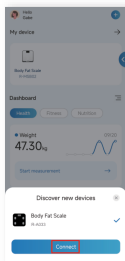

Метод 2


1. Отворете приложението RENPHO Health и стъпете върху електродите на везната с боси и сухи крака.
2. Докоснете „+“ в горния десен ъгъл на страницата „Device“ (Устройство), за да свържете ръчно.
3. Докоснете иконата „Body Fat Scale“ (Везна за телесен състав), когато се появи.

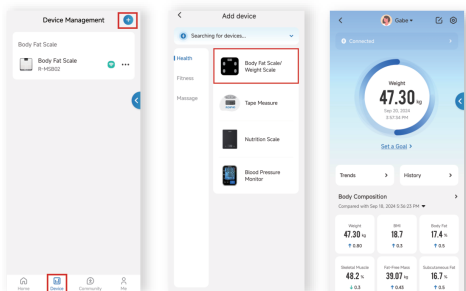

КАЛИБРИРАНЕ НА ELIS 1C

Калибрирайте везната преди всяка употреба, за да осигурите точност.

1. Поставете везната върху равна и твърда повърхност. Избягвайте килими.
2. Стъпете върху везната с един крак, за да я активирате, и слезте.
3. Дисплеят показва „CAL“, а след това „0.0“ или „0.00“ – калибрирането е завършено.

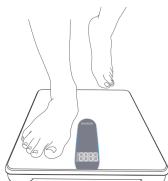

CAL → 00
or
CAL → 000

УПОТРЕБА НА ELIS 1C


1. Уверете се, че везната е поставена върху равна и твърда повърхност.
2. След калибриране стъпете върху електродите с боси и сухи крака, стойте неподвижно и изчакайте окончателния резултат на дисплея.
3. След измерването везната изпраща данните към приложението по Bluetooth. Отворете приложението, за да синхронизирате и разгледате подробните си показатели.



Ляво: правилно положение – боси и сухи крака върху електродите.
Дясно: неправилно положение – мокри крака или обувки.

СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

Винаги поставяйте батериите правилно според поляритета (+ и -), обозначен върху батерията и везната.

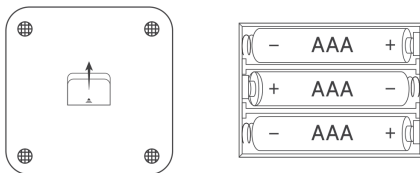

Почистете контактите на батериите и на везната преди поставяне. Използвайте батерии с правилния размер и тип. Не смесвайте нови с употребявани батерии, нито батерии от различен тип или марка. Сменяйте всички батерии от комплекта едновременно.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Везната не отчита телесни мазнини или други данни

- Уверете се, че краката ви са боси и сухи.
- Стойте неподвижно, докато на дисплея се появи окончателният резултат.
- Ако все още няма резултат, намажете стъпалата с крем и измерете отново или помолете друг човек да опита същите стъпки.

Регистрирах акаунт на сайта на RENPHO, но не мога да вляза с него в приложението

Сайтът на RENPHO и приложението RENPHO Health са две отделни системи. Създайте отделен акаунт за приложението RENPHO Health.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Свържете се с нас при въпроси или затруднения. Екипът за обслужване на клиенти на RENPHO осигурява бърз отговор в рамките на работното време.

Телефон (Обединено кралство)

+44 (0)7434 666088, понеделник – петък, 9:00 – 17:00 (GMT)

Имейл (ЕС и УК)

support-eu@renpho.com

При дефектни продукти или връщане на артикули се свържете с нас, като посочите номера на поръчката си. НЕ изхвърляйте части от продукта – те може да са необходими за проверка или ремонт.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ



Символ „зачеркнат контейнер“

Символът на зачеркнатия контейнер означава, че по закон сте задължени да изхвърляте тези уреди отделно от несортираните битови отпадъци. Батериите и акумулаторите, които не са трайно вградени, трябва да бъдат извадени предварително и изхвърлени отделно.

Връщане на стари уреди

Собствениците на стари уреди могат да ги предадат в предвидените от публичните органи по управление на отпадъците пунктове за връщане или събиране, за да се осигури правилното им третиране.

Лични данни

Всички крайни потребители носят отговорност за изтриването на личните си данни от уредите, които предават за изхвърляне.



Батерии и акумулатори

1. Символът на зачеркнатия контейнер върху батерии или акумулатори означава, че те не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци в края на живота им.
2. По закон сте задължени да върнете старите батерии и акумулатори след употреба. Това може да стане безплатно в пункт за събиране във вашия район. Адреси на подходящи пунктове можете да получите от общината.

3. Батериите може да съдържат вещества, вредни за околната среда и човешкото здраве. Разделното събиране и рециклиране цели да предотврати тези негативни последици.
4. Избягвайте образуването на отпадъци от батерии – не оставяйте небрежно батерии или електрическо и електронно оборудване, съдържащо батерии, на обществени места.



Декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. декларира, че това оборудване съответства на Директива 2014/53/ЕС, Директива 2011/65/ЕС и другите приложими разпоредби. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

**Максимална радиочестотна
мощност**

2,87 dBm

Работна честота

2402 MHz – 2480 MHz

Производител на батериите

GUANGDONG TIANQIU ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD., 9th Floor,
No.26-30 Heyi Street, Sanyuanli Avenue Road, Baiyun District, Guangzhou City,
Китай. www.tmmq.cn, qd@gdtianqiu.com

Производител: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd., No. 810-C063, 8th
Floor, Xiangbin International Financial Centre, No.18, West Free Trade Street, Qianhai
Bay, Shenzhen, Guangdong Province, 518000, Китай.