

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ · МАСАЖОР ЗА ВРАТ И РАМЕНЕ

U-NECK 1

Модел: RF-SNM060



Прочетете внимателно ръководството преди употреба
и го запазете за бъдеща справка.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност	01
Запознайте се с уреда	04
Указания за употреба	04
Зони за масаж	06
Грижа и поддръжка	07
Технически спецификации	07
Отстраняване на проблеми	08
Обслужване на клиенти	09
Изхвърляне и съответствие	10

Благодарим ви, че избрахте масажора за врат и рамене RENPHO U-Neck 1. Прочетете това ръководство преди първата употреба и го запазете за бъдеща справка.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.

1. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
3. Уредът е предназначен само за домашна употреба и не е медицинско изделие. Той не бива да се използва за лечение или облекчаване на заболяване или необичайно физическо състояние.
4. Консултирайте се с лекар преди употреба, ако попадате в някоя от следните групи: бременни жени и жени след раждане; лица с кожни инфекции, алергии, зачервявания и/или изгаряния по кожата; лица с остеопороза; лица, претърпели операция; лица с отоци или рани в областта на корема; лица с пейсмейкър или друго имплантирано медицинско устройство; пациенти със сърдечни заболявания, злокачествени тумори или други сериозни здравословни състояния; лица, които са на медицинско лечение; лица със сърдечни проблеми, нарушено кръвно налягане, диабет или неврологични заболявания.
5. Ако се почувствате зле или усетите необичаен дискомфорт, спрете употребата на уреда незабавно.
6. Уредът НЕ е подходящ за деца.
7. НЕ използвайте уреда по време на шофиране.
8. Възрастните хора трябва да използват уреда по указание на лекар.
9. НЕ използвайте уреда след употреба на алкохол или приспивателни.
10. НИКОГА не се опитвайте да проверявате или отваряте уреда по какъвто и да е начин.

11. НЕ използвайте уреда прекалено дълго, тъй като това може да причини леко увреждане на кожата.
12. НЕ поставяйте тежки предмети върху уреда.
13. НИКОГА не използвайте карфици или други метални закопчалки заедно с уреда.
14. НЕ използвайте уреда, ако сте нанесли масла или лосиони върху кожата си.
15. НИКОГА не почиствайте уреда, преди да сте го изключили от контакта. Използвайте кърпа, навлажнена с много малко количество вода. Може да използвате неабразивни почистващи препарати. НЕ включвайте уреда отново в контакта, докато не изсъхне напълно.

ВНИМАНИЕ

За да намалите риска от изгаряния:

1. Използвайте загряващите повърхности внимателно. Те могат да причинят сериозни изгаряния. Не използвайте върху участъци с намалена чувствителност на кожата или при нарушено кръвообращение. Употребата на загряване от деца или от лица с ограничени възможности без надзор може да бъде опасна.
2. Уредът има загряваща повърхност. Лицата, нечувствителни към топлина, трябва да го използват с повишено внимание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


За да намалите риска от изгаряния, пожар, токов удар или нараняване на хора:

1. Уредът никога не бива да се оставя без надзор, докато е включен в контакта. Изключвайте го от контакта, когато не се използва и преди поставяне или сваляне на части.
2. Не използвайте уреда под одеяло или възглавница. Може да се стигне до прекомерно нагриване и да причини пожар, токов удар или нараняване.
3. Необходим е строг надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца, болни или хора с увреждания.

4. Използвайте уреда само по предназначението, описано в това ръководство. Не използвайте приставки, които не са препоръчани от производителя.
5. Никога не използвайте уреда, ако кабелът или щепселът са повредени, ако уредът не работи правилно, ако е паднал, повреден е или е попадал във вода.
6. Не носете уреда за хранящия кабел и не използвайте кабела като дръжка.
7. Пазете кабела далеч от нагreti повърхности.
8. Никога не използвайте уреда със запушени вентилационни отвори. Пазете отворите чисти от власинки, косми и други замърсявания.
9. Никога не изпускайте и не поставяйте предмети в отворите на уреда.
10. Не използвайте на открито.
11. Не използвайте уреда там, където се използват аерозолни продукти (спрейове) или се подава кислород.
12. За да изключите уреда, поставете всички бутони в изключено положение и след това извадете щепсела от контакта.
13. Уредът трябва да се използва само със хранящия блок, доставен с него.
14. Уредът трябва да се хранва само с безопасно свръхниско напрежение, съответстващо на обозначението върху уреда.


ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С УРЕДА

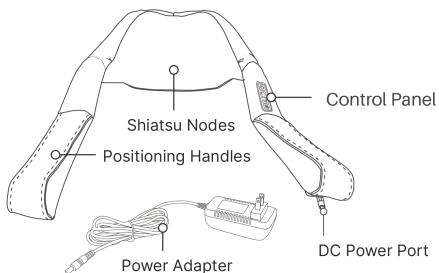

Надписите върху схемата означават: „Control Panel“ – панел за управление, „Shiatsu Nodes“ – шиацу възли, „Positioning Handles“ – ръкохватки за позициониране, „Power Adapter“ – захранващ адаптер, „DC Power Port“ – букса за захранване.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

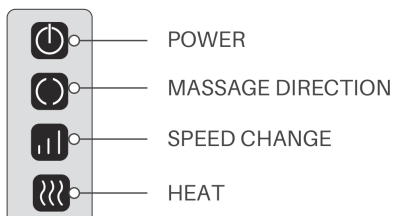

Бутоните върху панела означават: „POWER“ – включване и изключване, „MASSAGE DIRECTION“ – посока на масажа, „SPEED CHANGE“ – смяна на скоростта, „HEAT“ – загревяване.

1. Включете захранващия адаптер в буксата за захранване, след което включете адаптера в електрически контакт.
2. Хванете ръкохватките за позициониране и поставете уреда около врата си така, че шиацу възлите да са в центъра на гърба ви.
3. Натиснете бутона за включване и изключване, за да включите уреда.
4. Натиснете бутона за посока на масажа, за да смените посоката на въртене.
5. Натиснете бутона за скорост, за да превключите между трите степени: бавна, средна и бърза.
6. Натиснете бутона за загревяване, за да включите топлината; натиснете го отново, за да я изключите.
7. Използвайте ръкохватките, за да преместите шиацу възлите към други зони на врата и гърба и за да усилите или намалите натиска.
8. Натиснете бутона за включване и изключване по всяко време, за да изключите уреда.
9. Уредът се изключва автоматично след 15 минути непрекъсната работа.

Забележка:

НЕ се препоръчва използването на функцията за загревяване повече от 15 минути наведнъж. Оставете масажора да се охлади между два цикъла на загревяване.

ЗОНИ ЗА МАСАЖ



Upper Back / Neck



Mid Back



Lower Back



Thighs / Legs



Waist



Shoulders / Arms

Надписите върху схемата означават: „Upper Back / Neck“ – горна част на гърба и врат, „Mid Back“ – среден гръб, „Lower Back“ – кръст, „Thighs / Legs“ – бедра и крака, „Waist“ – талия, „Shoulders / Arms“ – рамене и ръце.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

1. Когато не използвате масажора, го съхранявайте на безопасно, хладно и сухо място.
2. След изключване от контакта избърсвайте уреда с мека, влажна кърпа и неабразивен почистващ препарат.
3. Никога не потапяйте уреда в течности.
4. Пазете уреда далеч от разтворители и агресивни почистващи препарати.
5. НЕ се опитвайте да ремонтирате масажора. В него няма части, които да се обслужват от потребителя.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Наименование	Масажор за врат и рамене
Модел	RF-SNM060
Захранване	12 V, 2 A (адаптер, включен в комплекта)
Номинална мощност	24 W
Масажни възли	8 ротационни шиацу възела
Скорости	3 (бавна, средна, бърза)
Загряване	до 47 °C (118 °F)
Таймер	15 минути с автоматично изключване
Размери и тегло	354 × 164 × 182 мм, 1,6 кг

Какво има в кутията

- Масажор за врат и рамене × 1
- Захранващ адаптер × 1
- Ръководство за потребителя × 1

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Масажорът не се включва	Щепселът на адаптера е разхлабен	Включете щепсела отново в контакта.
Масажорът не се включва	Уредът е изключен	Натиснете бутона за включване.
Масажорът не се включва	Няма захранване	Опитайте с друг електрически контакт.
Изключва се сам	Таймерът за 15 минути	Масажорът има таймер и се изключва сам след 15 минути. Натиснете бутона за включване, за да започнете нов 15-минутен масаж.
Изключва се сам	Защита от прегряване	Защитата изключва масажора автоматично, когато се загрее прекалено. Изчакайте уредът да изстине, преди да го включите отново.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Свържете се с нас при въпроси или затруднения. Екипът за обслужване на клиенти на RENPHO осигурява бърз отговор в рамките на работното време.

Телефон (Обединено кралство)

+44 (0)7434 666088, понеделник – петък,
9:00 – 17:00 (GMT)

Имейл (ЕС и Обединено кралство)

support-eu@renpho.com

При дефектни продукти или връщане на артикули се свържете с нас, като посочите номера на поръчката си. НЕ изхвърляйте части от продукта – те може да са необходими за проверка или ремонт.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ



Символ „зачеркнат контейнер“

Символът на зачеркнатия контейнер означава, че по закон сте задължени да изхвърляте тези уреди отделно от несортираните битови отпадъци. Батериите и акумулаторите, които не са трайно вградени, трябва да бъдат извадени предварително и изхвърлени отделно.

Връщане на стари уреди

Собствениците на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване могат да го предадат в предвидените от публичните органи по управление на отпадъците пунктове за връщане или събиране, за да се осигури правилното му третиране.



Декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. декларира, че това оборудване съответства на Директива 2014/30/ЕС, Директива 2014/35/ЕС, Директива 2011/65/ЕС и другите приложими разпоредби. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Производител: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd., No. 810-C063, 8th Floor, Xiangbin International Financial Centre, No.18, West Free Trade Street, Qianhai Bay, Shenzhen, Guangdong Province, 518000, Китай.