

RENPHO

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

U-NECK GO

Модел: RP-SNM067



Шиацу масажор за врат и рамене с топлинна функция
Прочетете внимателно ръководството преди употреба
и го запазете за бъдеща справка.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност	01
Внимание: риск от изгаряния	01
Предупреждение: риск от изгаряния, пожар, токов удар или нараняване	01
За масажора за врат и рамене	02
Употреба на масажора	03
Отстраняване на проблеми	05
Грижа и поддръжка	05
Обслужване на клиенти	06
Изхвърляне и съответствие	06

Благодарим ви, че избрахте масажора за врат и рамене на RENPHO. Уредът предлага мощен шиаци масаж. Докато се наслаждавате на облекчението, използвайте го внимателно и с мисъл за безопасността. За да осигурите безопасност и да избегнете материални щети, прочетете внимателно това ръководство и използвайте уреда според указанията. Неспазването им може да доведе до тежки наранявания или смърт и/или сериозни материални щети.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.

1. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
3. Уредът е предназначен само за домашна употреба и не е предвиден за медицински цели. Той не бива да се използва за лечение или облекчаване на заболяване или необичайно физическо състояние.
4. Консултирайте се с лекар преди употреба, ако попадате в някоя от следните групи: бременни жени и жени след раждане; лица с кожни инфекции, алергии, зачервяване и/или изгаряния по кожата; лица с остеопороза; лица, претърпели операция; лица с подуване или рана в областта на корема; лица с пейсмейкър или друг имплантиран медицински апарат; пациенти със сърдечно заболяване, злокачествено образувание или друго сериозно здравословно състояние; лица, които са на медицинско лечение; лица със сърдечни проблеми, отклонения в кръвното налягане, диабет или неврологични разстройства.
5. Ако се почувствате зле или усетите необичаен дискомфорт, спрете употребата на уреда незабавно.
6. Уредът НЕ е подходящ за деца.
7. НЕ използвайте уреда, докато шофирате.
8. Възрастните хора трябва да използват уреда под лекарско наблюдение.
9. НЕ използвайте уреда след употреба на алкохол или приспивателни.
10. НИКОГА не се опитвайте да проверявате или отваряте уреда по какъвто и да е начин.
11. НЕ използвайте уреда прекалено дълго, тъй като това може да причини леко увреждане на кожата.
12. НЕ поставяйте тежки предмети върху уреда.
13. НИКОГА не използвайте безопасни игли или други метални закопчалки заедно с уреда.
14. НЕ използвайте уреда, ако сте нанесли масла или лосиони върху кожата си.
15. НИКОГА не почиствайте уреда, преди да сте го изключили от контакта. Използвайте кърпа, навлажнена с много малко вода. Може да използвате неабразивни почистващи препарати. НЕ включвайте уреда обратно в контакта, докато не изсъхне напълно.

ВНИМАНИЕ: РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ

1. Уредът има загрята повърхност. Хората с намалена чувствителност към топлина трябва да го използват внимателно.
2. Използвайте загретите повърхности внимателно. Те могат да причинят сериозни изгаряния. Не използвайте уреда върху участъци с намалена чувствителност на кожата или при лошо кръвообращение. Употребата на топлина без надзор от деца или недееспособни лица може да бъде опасна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: РИСК ОТ ИЗГАРЯНИЯ, ПОЖАР, ТОКОВ УДАР ИЛИ НАРАНЯВАНЕ

1. Уредът никога не бива да се оставя без надзор, докато е включен в контакта. Изключвайте го от контакта, когато не го използвате, както и преди поставяне или сваляне на части.
2. Не използвайте уреда под одеяло или възглавница. Може да се получи прекомерно нагряване и да причини пожар, токов удар или нараняване.
3. Необходим е строг надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца, болни или хора с увреждания.
4. Използвайте уреда само по предназначение, както е описано в това ръководство. Не използвайте приставки, които не са препоръчани от производителя.
5. Никога не използвайте уреда, ако кабелът или щепселът са повредени, ако не работи правилно, ако е паднал, ако е повреден или е паднал във вода.
6. Не носете уреда за захранващия кабел и не използвайте кабела като дръжка.

7. Дръжте кабела далеч от загрети повърхности.
8. Никога не използвайте уреда със запущени вентилационни отвори. Пазете отворите чисти от власинки, косми и подобни.
9. Никога не изпускайте и не поставяйте предмети в отворите на уреда.
10. Не използвайте уреда на открито.
11. Не използвайте уреда там, където се използват аерозолни продукти или се подава кислород.
12. За да изключите уреда, поставете всички бутони в изключено положение и след това извадете щепсела от контакта.
13. Уредът може да се използва само със захранващия блок, доставен с него.
14. Уредът трябва да се захранва само с безопасно свръхниско напрежение, съответстващо на обозначението върху уреда.


ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ЗА МАСАЖОРА ЗА ВРАТ И РАМЕНЕ

1. Какво има в кутията

- Масажор за врат и рамене × 1
- Чанта за съхранение от PU кожа × 1
- Мрежов адаптер × 1
- Адаптер за автомобилна запалка × 1
- Мек текстилен ръкав × 1
- Ръководство за потребителя × 1

2. Общ преглед на продукта

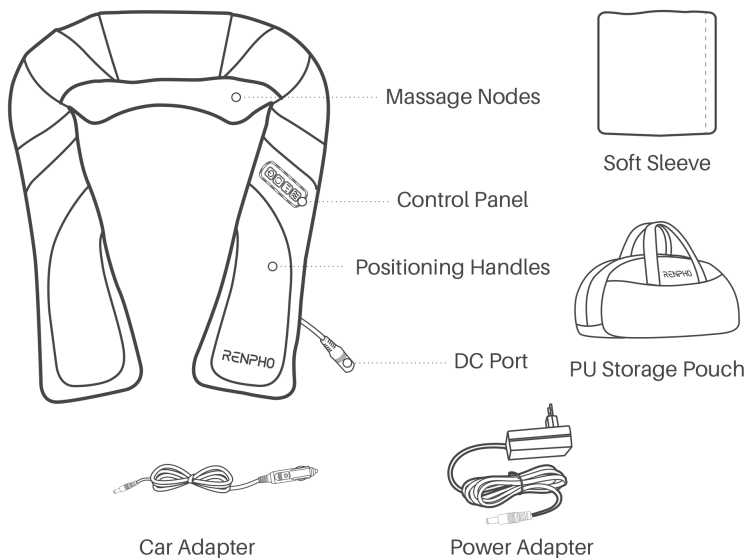

Надписите върху схемата означават: „Massage Nodes“ – масажни възли, „Control Panel“ – панел за управление, „Positioning Handles“ – дръжки за позициониране, „DC Port“ – вход за захранване, „Soft Sleeve“ – мек ръкав, „PU Storage Pouch“ – чанта за съхранение от PU кожа, „Car Adapter“ – адаптер за автомобилна запалка, „Power Adapter“ – мрежов адаптер.


3. Технически спецификации

Наименование	Масажор за врат и рамене
Модел	RP-SNM067
Материал	PU кожа и дишаща мрежа
Захранване	12 V, 2 A постоянен ток
Номинална мощност	24 W
Автоматично изключване	15 минути
Бруто тегло	2,3 кг
Размери на продукта	45 (Д) × 17 (Ш) × 20 (В) см
Ниво на шум	до 55 dB
Температура	под 47,8 °C

УПОТРЕБА НА МАСАЖОРА

1. Включете мрежовия адаптер във входа за захранване на уреда и след това в контакта. В комплекта има и адаптер за автомобилна запалка, така че уредът може да се използва и в кола. След това поставете масажора върху зоната, която искате да масажирате.

2. Бутони за управление

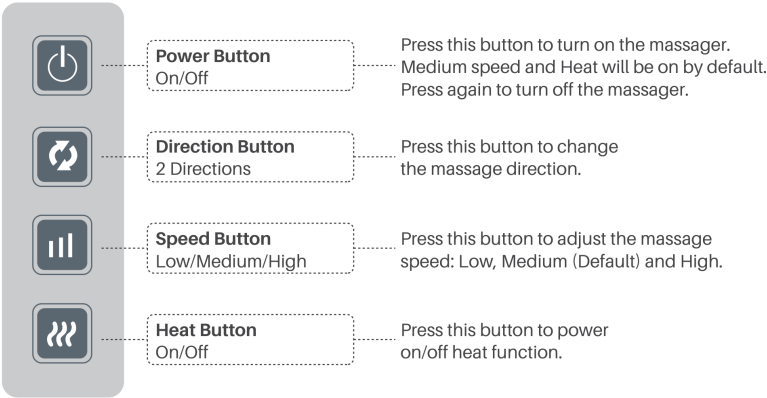

Бутон за включване (вкл./изкл.)

Натиснете, за да включите масажора. По подразбиране се стартират средна скорост и загреване. Натиснете отново, за да изключите уреда.

Бутон за посока (2 посоки)

Натиснете, за да смените посоката на масажа.

**Бутон за скорост
(ниска/средна/висока)**

Натиснете, за да изберете скоростта на масажа: ниска, средна (по подразбиране) или висока.

Бутон за загреване (вкл./изкл.)

Натиснете, за да включите или изключите функцията за загреване.

Посоката на въртене на масажните възли се сменя на всяка минута.

Масажорът има вграден таймер за 15 минути. Той се изключва автоматично след 15 минути непрекъсната работа.

3. Зони за масаж


Може да използвате масажора върху изброените по-долу части на тялото. НЕ го използвайте върху главата, лактите, коленете, гърдите или други зони.



Neck



Shoulder

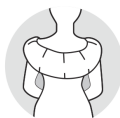

Back



Waist



Abdomen



Thighs



Legs



Feet



Calf

Надписите върху схемата означават: „Neck“ – врат, „Shoulder“ – рамо, „Back“ – гръб, „Waist“ – кръст, „Abdomen“ – корем, „Thighs“ – бедра, „Legs“ – крака, „Feet“ – стъпала, „Calf“ – прасец.

4. Мек ръкав

Поставете включения мек ръкав върху масажора за допълнителен комфорт. Увийте ръкава около корпуса и затегнете велкро лентата, както е показано на схемата.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Масажорът не се включва	Щепселът на адаптера е разхлабен	Включете отново щепсела в контакта.
Масажорът не се включва	Бутонът за включване е изключен	Натиснете бутона за включване, за да стартирате масажора.
Масажорът не се включва	Няма захранване	Опитайте с друг контакт.
Масажорът не се включва	Не е използван оригиналният адаптер	Използвайте само адаптерите от комплекта. Ако адаптерът е повреден, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
Масажорът се изключва внезапно	Вграденият таймер изключва уреда след 15 минути непрекъсната работа	Натиснете бутона за включване, за да стартирате нов 15-минутен масаж.
Масажорът се изключва внезапно	Задействала се е защитата от прегряване поради висока температура	Изчакайте уредът да изстине, преди да го включите отново.
Не се усеща топлина	Функцията за заграване не е активирана	Натиснете бутона за заграване, за да я активирате.
Не се усеща топлина	Използван е мекият ръкав	Свалете мекия ръкав.
Не се усеща топлина	За да се предотврати прегряване, температурата е ограничена до 47,8 °C	При твърде висока температура лесно може да нараните врата си.
Не се усеща интензитет	Не дърпате достатъчно силно дръжките	Дръпнете по-силно дръжките за позициониране.
Не се усеща интензитет	Интензитетът на масажа е слаб	Натиснете бутона за скорост, за да увеличите интензитета.
Усеща се болка по време на употреба	Интензитетът на масажа е твърде силен	Натиснете бутона за скорост, за да намалите интензитета, или поставете мекия ръкав от комплекта.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

1. Когато не използвате масажора, съхранявайте го на хладно и сухо място. Пазете го далеч от остри предмети.
2. Изключвайте масажора от контакта преди почистване. Избърсвайте го с мека влажна кърпа и неабразивни почистващи препарати.
3. Никога не потапяйте масажора в течност. Пазете го далеч от разтворители и агресивни препарати.
4. Не се опитвайте да ремонтирате масажора. В него няма части, които се обслужват от потребителя.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Свържете се с нас при въпроси или затруднения. Екипът на RENPHO отговаря бързо в рамките на работното време.

Телефон (Обединено кралство)

+44 (0)7434 666088, понеделник – петък, 9:00 – 17:00 (GMT)

Имейл (ЕС и Обединено кралство)

support-eu@renpho.com

При дефектни продукти или връщане на артикули се свържете с нас, като посочите номера на поръчката си. НЕ изхвърляйте части от продукта – те може да са необходими за проверка.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ



Символ „зачеркнат контейнер“

Символът на зачеркнатия контейнер означава, че по закон сте задължени да изхвърляте този уред отделно от несортираните битови отпадъци. Батериите и акумулаторите, които не са трайно вградени, трябва да бъдат извадени и изхвърлени отделно.

Връщане на стари уреди

Предайте стария уред в пунктовете за връщане или събиране, определени от публичните органи по управление на отпадъците.



Декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. декларира, че това оборудване съответства на Директива 2014/30/ЕС, Директива 2014/35/ЕС и Директива 2011/65/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Производител: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd., No. 810-C063, 8th Floor, Xiangbin International Financial Centre, No.18, West Free Trade Street, Qianhai Bay, Shenzhen, Guangdong Province, 518000, Китай.