



Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Инструкции за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ограничения за употреба

- Не използвайте масажния пистолет върху главата, лицето, лактите, коленете и други стави, гръбначния стълб или други костни зони с минимално мускулно покритие.
- Не използвайте масажния пистолет отстраня, отпред или отзад (в областта на шийните прешлени) на врата, за да избегнете увреждане на каротидния синус. В противен случай може да се стигне до припадък и спиране на сърцето.
- Не използвайте масажния пистолет върху подмишниците, вътрешната страна на мишницата, вътрешната страна на ключицата, вътрешната страна на лакътя, задната част на коляното, корема, областта на бърбреците, гениталите или други чувствителни зони с много нерви и кръвоносни съдове.
- Не използвайте масажния пистолет под нивото на корема при хора с урологични заболявания, като бъбречни камъни, камъни в уретера, камъни в пикочния мехур, камъни в уретрата, инфекции на пикочните пътища и др.
- Не използвайте масажния пистолет върху зони с натъртвания или болка, повърхностни рани, локална температура, зачервяване, подуване или дискомфорт, възпаление, мускулни спазми, мускулни разкъсвания, остри навяхвания, контузии и разтежения.
- Не използвайте масажния пистолет, ако след интензивно натоварване се появят симптоми като температура, гадене, повръщане или мускулна болка/слабост; потърсете незабавно медицинска помощ.
- Не използвайте масажния пистолет при хора със следните заболявания: сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания, заболявания на кръвата, нарушения в съсирването, тромбоцитопенична пурпура, плаки в областта на шията, разширени вени, венозна тромбоза, рак, тумори и психични заболявания.
- Не използвайте масажния пистолет при хора с фрактури или метални импланти.
- Не използвайте масажния пистолет по време на шофиране или при извършване на прецизни операции.
- Не използвайте масажния пистолет продължително без прекъсване, за да избегнете увреждане на мускулите от прекомерен масаж.
- Ако не сте професионален спортист или напреднал фитнес потребител, започнете с ниска степен и постепенно увеличавайте нивото, когато тялото ви се адаптира.

ВНИМАНИЕ

Предпазни мерки

- Масажният пистолет е предварително зареден преди доставката. Препоръчва се след разопаковане да го заредите докрай преди употреба.
- По време на работа не доближавайте пръсти, коса или други части на тялото до мястото на съединяване между масажната глава и предната част на масажния пистолет, за да избегнете приципване.

- Не запушвайте и не поставяйте чужди предмети в канала на масажната глава или в порта за зареждане.
- Не потапяйте масажния пистолет във вода или други течности.
- Не използвайте масажния пистолет във влажна среда.
- Зареждайте и използвайте уреда при температура на околната среда от 5°C до 40°C.
- Дръжте масажния пистолет далеч от вода и огън, както и от корозивни среди, за да не се влоши работата на батерията.
- Не се опитвайте сами да ремонтирате, разглобявате или модифицирате масажния пистолет.
- Не използвайте масажния пистолет по време на зареждане.
- След пълно зареждане изключете масажния пистолет своевременно от захранването.
- Ако масажният пистолет не е използван дълго време, заредете го преди употреба.
- Масажната глава е частично изработена от силикон. Ако сте алергични към силикон, не използвайте кръглата и U-образната глава; препоръчва се плоската глава.

Групи, за които този масажен пистолет не е подходящ:

Непълнолетни лица и хора над 80 години нямат право да използват масажния пистолет, за да се избегнат инциденти. Ако за вас е валидно някое от следните състояния, преди употреба се консултирайте с хирург или лекуващ лекар в реномирана болница и използвайте уреда само под наблюдение след получено разрешение.


- Бременни жени или жени, които току-що са родили.
- Хора на 60 и повече години.
- Хора с рабдомиолиза.
- Хора с липсващи крайници или с парализация.
- Хора със сърдечен пейсмейкър или стент.
- Хора, претърпели операция през последните 12 месеца.
- Хора с отклонения в гръбначния стълб, ставите или костите, или страдащи от ортопедични заболявания като остеопороза, шийна спондилоза и дискова херния в лумбалната област.
- Хора с нарушено усещане или подвижност на крайниците поради заболяване или възраст.
- Хора с усложнения, свързани със заболяване (напр. невропатия или увреждане на ретината).

При неизправност или повреда

- Не изпускате, не разклащайте и не удряйте масажния пистолет. Силните удари могат да повредят компонентите или да доведат до неправилна работа. Ако това се случи, своевременно се обърнете към отдела за следпродажбено обслужване.
- Продължителната непрекъсната употреба може да повиши температурата на повърхността и да причини повреда. Не го използвайте твърде дълго без прекъсване.
- Ако уредът се нагрее, започне да отделя дим, бръмчи прекомерно и т.н., незабавно прекратете употребата и се свържете с екипа за следпродажбено обслужване.
- Ако масажният пистолет прегрее или се деформира, подуе се или батерията протече по време на работа, спрете да го използвате веднага и се свържете с отдела за следпродажбено обслужване.

Преглед на продукта

Масажен пистолет

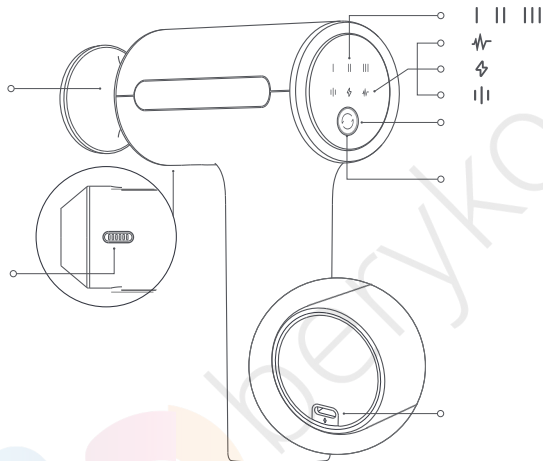

Level/Battery Level Indicator
Smart-speed Massage Mode Indicator

Индикатор за зареждане

Fixed-speed Exercise Mode Indicator

Функционален бутон

Индикатор за сензора за натиск

Порт за зареждане


Охлаждащ отвор

Гнездо за масажната глава


Приложения на масажния пистолет

- Облекчава мускулната болка със забавено начало след тренировка и отпуска напрегнатите мускули.
- Намалява болката и сковаността в гърба и раменете, причинени от продължително седене и неправилна стойка.
- Подпомага отпускането на мускулите с ежедневен масаж.


Списък с аксесоари към продукта

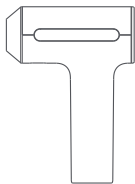


Масажен пистолет

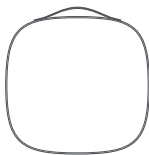

Чанта за съхранение

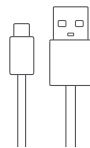


Кабел за зареждане

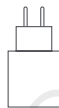

Захранващ адаптер



Кръгла глава

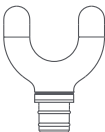

U-образна глава



Плоска глава



Ръководство за потребителя



Условия на гаранцията


- **Кръгла глава:** Подходяща за масаж на по-големи мускулни групи като рамене, кръст, ръце, ханш, бедра и прасци.
- **U-образна глава:** Подходяща за масаж на гърба, зоните от страни на гръбначния стълб и прасците. 04
- **Плоска глава:** Подходяща за отпускане на всички мускули.

Забележка:

Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството са само с ориентировъчна цел. Реалният продукт и функциите му може да се различават вследствие на подобрения по продукта.

Монтаж и демонтаж

Монтиране на масажната глава

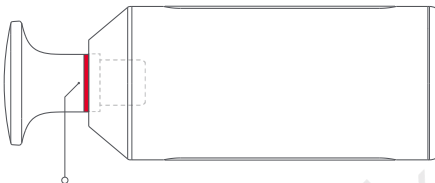

Схематична линия за монтаж

- Поставете подходяща масажна глава според желанния тип масаж. 05
- При поставяне на масажната глава натиснете основата ѝ силно в отвора на масажния пистолет, като се уверите, че маркировката на главата е наравно с отвора.

Забележка:

Червената линия на фигурата показва схематичната линия за монтаж, а при реалния продукт това е гланцирана повърхност.

Демонтаж на масажната глава

Хванете масажната глава, издърпайте я навън, завъртете и я изтеглете, за да я свалите.

ВНИМАНИЕ

- Монтирайте и демонтирайте масажната глава само когато масажният пистолет е изключен, и преди включване се уверете, че главата е закрепена стабилно.
- По време на работа не регулирайте, не поставяйте и не сваляйте масажната глава, за да избегнете прищипване.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени възможности, или без опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са получили инструкции за работа с уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Този уред съдържа батерии, които могат да се подменят само от квалифицирани лица.
- Този уред съдържа батерии, които не подлежат на подмяна.

Зареждане




Поставете кабела за зареждане в порта за зареждане и свържете захранващия адаптер към електрозахранването.

Забележка:

По време на зареждане масажният пистолет се изключва автоматично и не може да бъде включен. За зареждане използвайте включения захранващ адаптер.


Описание на състоянията на индикатора за нивото на батерията

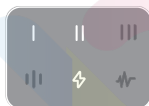

Зареждане



По време на употреба

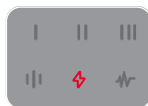

Ниско ниво на батерията

- Зареждане: Индикаторите за нивото на батерията пулсират в бяло и се включват последователно отляво надясно според текущото ниво на батерията. Напълно заредено: Трите индикатора мигат едновременно 20 секунди, след което изгасват. Изключете масажния пистолет от захранването своевременно.
- След пълно зареждане продуктът автоматично преминава в режим „изключено“ в рамките на 20 минути. Консумацията на енергия на този продукт при пълно зареждане при 230 V, 50 Hz е 0,16 W.
- По време на употреба: Индикаторът за текущото ниво свети постоянно в бяло.
- Ниско ниво на батерията: Индикаторът за текущото ниво мига в червено. Заредете масажния пистолет навреме.

Инструкции

Включване: Натиснете и задръжте бутона за захранване за 2 секунди. Индикаторите за ниво и режим светват, което показва, че масажният пистолет е включен.

Изключване: Натиснете и задръжте бутона за захранване за 2 секунди. Масажният пистолет спира да работи, а индикаторът за ниво изгасва, което показва, че устройството е изключено.

По подразбиране масажният пистолет се изключва автоматично след 10 минути непрекъсната работа.

Регулиране на нивото: Когато е включен, натискайте бутона за захранване, за да превключвате между ниво 1, ниво 2 и ниво 3. Индикаторите за ниво отговарят съответно на ниво 1, ниво 2 и ниво 3 отляво надясно.

Превключване на режими: Когато масажният пистолет е включен, натиснете функционалния бутон, за да превключвате между режима с фиксирана скорост и режима с интелигентна скорост, а съответният индикатор за режим ще остане бял.

Рестартиране след блокиране и спиране: При прилагане на прекомерен натиск се активира защитата от блокиране и масажният пистолет спира да работи. При блокиране натиснете бутона за захранване в рамките на 15 секунди, за да рестартирате масажния пистолет; ако са минали повече от 15 секунди, натиснете и задръжте бутона за захранване 2 секунди, за да включите масажния пистолет.


Запаметяване на ниво: Когато възникне блокиране или масажният пистолет бъде изключен, системата автоматично запаметява текущия режим на работа и нивото. При следващо включване масажният пистолет по подразбиране ще стартира с режима и нивото отпреди блокирането или изключването. Системата запаметява отделно нивата за режима с фиксирана скорост и режима с интелигентна скорост. При смяна на режимите нивата могат да се променят съответно.

Относно режимите



- Тренировъчен режим с фиксирана скорост: Масаж с постоянна скорост за ефективно отпускане на фасциите и бързо възстановяване на мускулния тонус — подходящ за облекчаване на болезненост и умора след тренировка.
- Масажен режим с интелигентна скорост: Масаж с променлива скорост за намаляване на мускулното напрежение чрез промяна на ритъма на масажа. Подходящ е за ежедневен отпускане и възстановяване от умора.

Описание на състоянието на индикаторния пръстен за сила на натиск

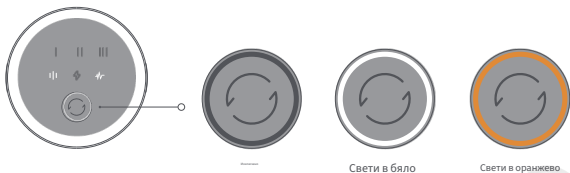

- Когато индикаторният пръстен изгасне, това означава, че натискът е слаб и масажният пистолет работи в режим на нежен масаж. Можете да регулирате интензитета според предпочитанията си.
- Когато индикаторният пръстен свети в бяло, това означава, че интензитетът на масажа е умерен, а масажният пистолет е в режим на стандартен масаж. Можете да регулирате интензитета според предпочитанията си.
- Когато индикаторният пръстен свети в оранжево, това означава, че интензитетът на масажа е висок. Препоръчва се да намалите натиска, за да избегнете нараняване.

Използване на масажния пистолет

Притиснете леко масажната глава към мускулната зона, която има нужда от отпускане, и бавно я движете напред-назад. При места с осезаема болезненост може леко да увеличите натиска и да задържите 15 до 30 секунди.

Забележки:

- Препоръчва се да започнете с ниска степен на работа на масажния пистолет.
- Препоръчва се употреба върху зони с достатъчно мускулна маса.
- Не задържайте на едно и също място повече от 1 минута.
- Не прилагайте прекомерен натиск, за да избегнете нараняване.
- Препоръчителното време за използване е 10 минути. Ако все още усещате стягане и болезненост, може да удължите масажа умерено. Не го използвайте непрекъснато повече от 30 минути.

Грижа и поддръжка

Почистване

Почиствайте редовно масажния пистолет и крайниците с чиста, леко навлажнена мека кърпа или мокра кърпичка и ги подсушавайте със суха кърпа или хартиена салфетка, преди да ги приберете обратно в калъфа за съхранение или в опаковъчната кутия.

Предупреждения

- Не изплаквайте с вода и не излагайте масажните крайници на пряка слънчева светлина.
- Преди почистване се уверете, че масажният пистолет е изключен и изваден от контакта.
- Не използвайте корозивни течности за почистване, тъй като това може да повреди или напука масажния пистолет или да промени цвета му.

Предпазни мерки при съхранение

- Съхранявайте масажния пистолет на хладно и сухо място.
- Не го съхранявайте при температура над 40°C или под -5°C. Пазете го от влага, източници на вода или огън, както и от корозивна среда, за да не се влоши работата на батерията.
- Масажният пистолет може да се прибере в калъфа за съхранение или при пътуване.
- Не удряйте, не притискайте, не изпускайте, не хвърляйте и не драскайте масажния пистолет.
- Може да се транспортира в автомобил, влак, кораб и самолет. Трябва да бъде добре фиксиран.
- Ако не е използван продължително време, заредете масажния пистолет преди употреба.
- Ако по време на съхранение масажният пистолет прегрее или се деформира, подуе се или батерията протече, незабавно прекратете употребата и се свържете със сервизното обслужване.

Технически характеристики

Наименование: Xiaomi Massage Gun 2	Нетно тегло: Прибл. 815 g
Модел: XMFG-M451	Порт за зареждане: Type-C
Размери: 145 × 64 × 200 mm	Номинален вход: 5 V 2 A
Тип батерия: литиево-йонна	Капацитет на батерията: 2450 mAh
Работна температура: 5 ~40	

Отстраняване на неизправности

Проблеми	Възможни причини	Решения
Индикаторът за нивото на батерията не светва по време на зареждане.	Захранващият адаптер не е свързан правилно към кабела за зареждане.	Проверете дали захранващият адаптер и кабелът за зареждане са включени коректно.
	Индикаторът за зареждане изгасва нормално, след като масажният пистолет се зареди напълно.	Масажният пистолет може да се използва нормално.
	Ако проблемът продължава и след като изключите горните две възможни причини, моля, свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.	
Батерията се зарежда бавно.	Температурата на батерията е твърде висока или твърде ниска.	Изчакайте температурата на батерията да се нормализира, след което продължете с използването.
	Напрежението или изходният ток на захранващия адаптер са твърде ниски.	Моля, зареждайте с предоставения захранващ адаптер.
Масажният пистолет не работи.	Батерията е с нисък заряд или е напълно изтощена.	Заредете масажния пистолет преди употреба.
	Масажният пистолет засича и спира поради прекомерен натиск.	Рестартирайте масажния пистолет.
	Ако проблемът продължава и след като изключите горните две възможни причини, моля, свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.	
Индикаторът свети с интензитета на натиска не светва	Ниско ниво на батерията	Заредете масажния пистолет преди употреба.
	Масажният пистолет не е включен	Натиснете и задръжте бутона за включване за 2 секунди, за да включите масажния пистолет.
Моторът издава необичайни шумове.	В мотора е попаднал чужд предмет.	Моля, свържете се със следпродажбеното обслужване.
	Налице е грешка в мотора.	
Температурата на масажния пистолет е твърде висока.	Времето на използване е прекалено дълго.	Използвайте масажния пистолет, след като температурата в режим на готовност се нормализира. Препоръчително е да използвате масажния пистолет не повече от 10 минути наведнъж и не повече от 30 минути без прекъсване.
	Налице е грешка в мотора.	Моля, свържете се със следпродажбеното обслужване.

ЕС декларация за съответствие



Ние, Xiaomi Communications Co., Ltd., декларираме, че това оборудване отговаря на приложимите директиви и европейски стандарти, както и на техните изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация за ОЕЕО



Всички продукти, обозначени с този символ, представляват отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) съгласно Директива 2012/19/ЕС и не трябва да се изхвърлят заедно с несортираните битови отпадъци. Вместо това следва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране и рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, посочен от държавните или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране помагат да се предотвратят възможни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве. За повече информация относно местоположението, както и условията за ползване на тези пунктове, се свържете с монтажника или с местните органи.

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: №019, 9-и етаж, сграда 6, 33 Xi'erqi Middle Road, район Haidian,
Пекин, 100085, Китай

За допълнителна информация посетете www.mi.com

Произведено в Китай

Версия на ръководството за потребител V1.0

Беруко

Приложение 1

Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Хага, Нидерландия
contact@support.mi.com

Вносител:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



A726-050200U-EU2

За зареждане използвайте оригиналния
захранващ адаптер A726-050200U-EU2.



60073